

Ščetkanje s ščetko SMART

1



Sprednje zobe čistite z majhnimi krožnimi gibi brez pritiskanja. Ščetine zobne ščetke usmerite v zgornjo dlesen.

2



Z majhnimi krožnimi gibi in ščetinami, usmerjenimi v dlesen, se pomikajte proti zadnjim zobem.

3



Pri spodnjih zobeh usmerite glavo ščetke v spodnjo dlesen in nadaljujte s krožnimi gibi brez pritiska.

4



Ker je glava ščetke smart manjša, je tudi navpično ščetkanje za sprednjimi zobmi enostavnejše.

5



Velikost glave ščetke je prilagojena čiščenju zadnjega dela ust, kjer se med prvimi pojavijo stalni zobje. Gre za prostor, ki ga velikokrat pozabimo dovolj kakovostno očistiti.

6



Najboljši način čiščenja za sprednjimi spodnjimi zobmi je z navpično usmeritvijo glave zobne ščetke z majhnimi krožnimi gibi.

Izdelki CURAPROX

USTNA VODA CURASEPT ADS

Equiat quam ad qui resed que cum facestor aut ut ut unde a doluptur, idi sit iliamus dolent inti occum voluptatus molest audias et officiat illabo.



MEDZOBNA ŠČETKA

Enostavno in nežno doseže kritična mesta med zobmi in temeljito odstrani zobne obloge v medzobnem prostoru.



STRGALO ZA JEZIK

Učinkovito odstrani močne obloge, ki so se nabrale skozi ves dan ali ponoči.



ZOBNA PASTA

Nizkoabrazivna pasta z encimi krepi naravno zaščitno vlogo slin.



ZOBNA ŠČETKA

Nežno in učinkovito odstrani zobne obloge na težje dostopnih mestih.



Izdelke CURAPROX lahko kupite v spletni trgovini www.zdrav-nasmeh.com ter v lekarnah, specializiranih trgovinah in drogerijah.



Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36
2000 Maribor, Slovenija


t. +386 (0)2 460 53 42
f. +386 (0)2 460 53 43
e. info@flegis.si

flegis

CURAPROX



SMART majhna in pametna

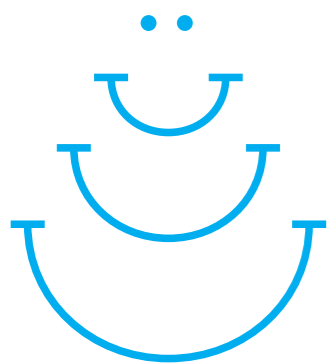

za vsak nasmeh

BODITE SMART

Zobna ščetka Curaprox smart ultra soft je naslednica otroške ščetke CURAkid, ki se uporablja od (izrasta) prvega zobka naprej. Kljub temu ne gre izključno za otroško ščetko, saj jo uporabljajo tudi mladostniki in odrasli z manjšo čeljustjo, kjer je težje dostopna mesta običajno bolj zahtevno kakovostno očistiti. Popolnost čiščenja, ki ga omogoča ščetka Curaprox CS 5460, zdaj dopolnjuje ščetka smart.

PREDNOSTI ZOBNE ŠČETKE SMART

Curaprox smart odlikuje majhna glava s kar 7600 ultra tankimi in mehкими ščetinami CUREN® premera 0,08 mm, ki omogočajo učinkovito ščetkanje. Zelo gosto vpeta vlakna pomagajo pri popolni odstranitvi plaka, majhna glava pa dosega tudi težje dostopna mesta v ustih. Tako kot klasična zobna ščetka 5460 ultra soft, ima tudi smart osemkotno držalo za lažji oprijem in vodenje pri čiščenju zob.


Lahko bi dejali, da prijetno sede v roko.

Kolekcijo smart sestavljajo zobne ščetke pestrih barv, tako da vsak lahko najde svojo priljubljeno kombinacijo.

nešteto prednosti



CURAPROX CS SMART

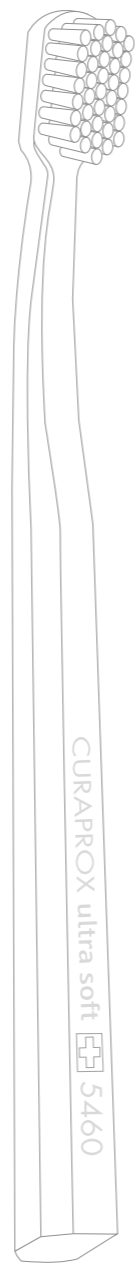

1.

Mala glava


za natančno ščetkanje težje dostopnih mest



2.

7600 ultrafinih ščetin CUREN®

za nežno in učinkovito ščetkanje

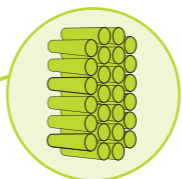

3.


8-kotno držalo

za spodbudo k ščetkanju pod priporočljivim kotom 45°



POMOČ STARŠEM

Ker so starši odgovorni za ustno zdravje svojih otrok, jim pri skrbi za njihove zobke s svojo mehko in nežnostjo lahko priskoči na pomoč prav ščetka smart. Pri njeni uporabi se zaradi ultratankih in gosto vpetih ščetin zmanjša možnost neprijetnega občutka pri ščetkanju, kar je ključno za to, da otrok ne razvije negativnega odnosa do čiščenja zob. Ker po obliki in barvah spominja na klasično zobno ščetko ultra soft, ki jo običajno uporabljajo odrasli, je lahko ščetka smart tudi za motivacijo otrok, ki se radi zgledujejo po svojih starših in tako s svojo »smartko« sledijo pozitivnemu zgledu.

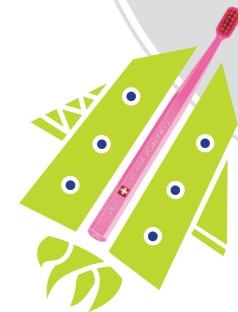

raketa med ščetkami

JE ŠČETKA SMART ZAME?

Če si zobe radi ščetkate s klasično ultra soft CS 5460, a želite nekaj novega, je smart vsekakor vredno preizkusiti. Zaradi njene majhne glave boste za čiščenje sicer potrebovali nekoliko več časa, vendar pa boste toliko boljše očistili težje dosegljive predele in tista območja, kjer zobje niso poravnani. Zelo gosto vpeta vlakna poskrbijo za popolno odstranitev plaka, majhna glava pa dosega tudi težje dostopna mesta v ustih. Smart je idealna ščetka za vse s fiksnim ortodontskim aparatom, saj njena mala glava dobro očisti tudi površine zob ob žičkah. Ko nehatte nositi aparat, lahko preidete na klasično ščetko ultra soft 5460 ali ostanete pri smart, če vam bo ustrezala. Za otroke in mladostnike, ki jim je CURAkid premajhna, klasična ščetka CS 5460 pa prevelika. Za odrasle z manjšo čeljustjo.

