




ZDRAV NASMEH

S FIKSNIM ORTODONTSKIM APARATOM



NEPRAVILNOSTI V POSTAVITVI ZOB LAHKO ODPRAVIMO V VSEH STAROSTNIH OBDOBJIH

Če je včasih veljalo, da zobni aparat nosijo samo otroci, se nam zdaj z njim nasmehne tudi vedno več odraslih. Starostne omejitve za odpravljanje nepravilnosti pravzaprav ni, saj zobje tako pri otrocih kot pri odraslih niso trdno zakoreninjeni v dlesen.

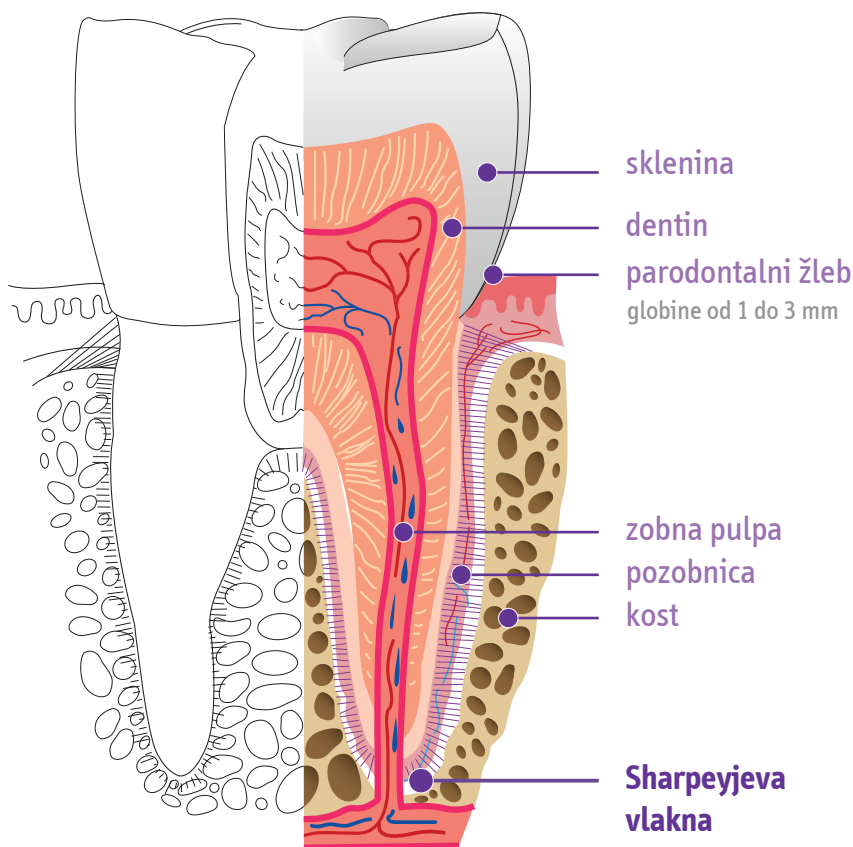

Zobje niso trdno zakoreninjeni v kost, ampak jih z njo povezujejo prožna Sharpeyeva vlakna. Zato lahko nepravilnosti v postavitvi zob odpravimo v katerem koli starostnem obdobju.


USTNA HIGIENA S FIKSNIM ORTODONTSKIM APARATOM ZAHTEVA VEČ ČASA

Da po snetju fiksne ortodontske aparata zobje ne bodo samo pravilno postavljeni, ampak tudi zdravi, bo treba pri vsakodnevni ustni higieni ob zobni in medzobnih ščetkah poseči še po kakšnem pripomočku.

Glavni povzročitelj težav v ustih – mehke zobne obloge ali zobni plak – se namreč ne nabira samo na zobeh, ampak tudi na nosilcih in žičkah fiksne ortodontske aparata.

Kritična mesta, kjer zobne obloge povzročajo največ težav:

**okrog nosilcev fiksne
ortodontske aparata, ob
stiku nosilca s površino zoba**

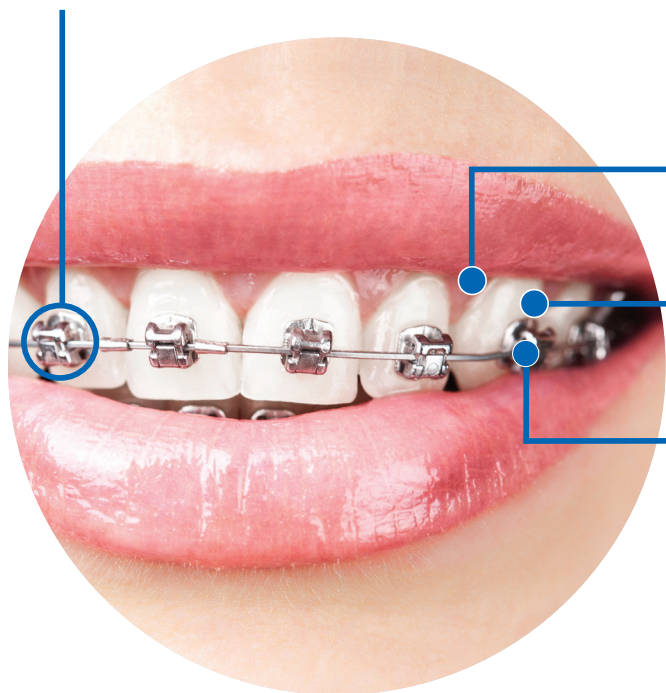

**rob med zobom
in dlesnijo**

**v medzobnem
prostoru**



**na nosilcih
in žičkah
fiksne
ortodontske
aparata**

Ustna higiena s fiksnim ortodontskim aparatom zahteva več časa,
vendar so lepo poravnani in zdravi zobje vredni truda.

KAKO OHRANITI ZDRAV NASMEH?




Zobe najprej ščetkamo z **ZOBNO ŠČETKO** z več tisoč mehkimi in gostimi ščetinami tako, da polovico ščetin položimo na zobe nad fiksnim ortodontskim aparatom, polovico pa na dlesni. Nato ščetkamo z majhnimi krožnimi gibi.

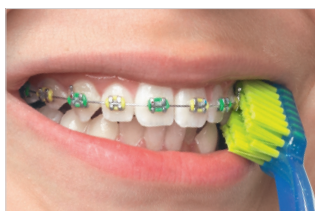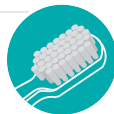

Nosilce z zunanje strani očistimo z **ZOBNO ŠČETKO, KI IMA NA SREDINI ŠČETIN UTOR**. Ščetko prislonimo k zobem tako, da je utor na nosilcih fiksnega ortodontskega aparata, in ščetkamo z majhnimi krožnimi gibi.




Predele okrog nosilcev, kjer se zaradi netemeljitega čiščenja najpogosteje pojavi zobna gniloba, očistimo s **ČOPASTO ZOBNO ŠČETKO**.

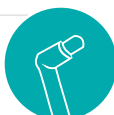

Medzobne prostore varno in učinkovito očistimo z ustrezno izbranimi **MEDZOBNIMI ŠČETKAMI**.



VEČJE MEDZOBNE ŠČETKE uporabimo za čiščenje žičk in nosilcev fiksnega ortodontskega aparata.

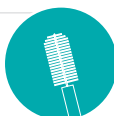

Za čiščenje nosilcev fiksnega ortodontskega aparata uporabimo **ZOBNO NITKO Z ODEBELJENO ČISTILNO GOBICO**.



Nekajkrat na mesec temeljitost ščetkanja preverimo **Z RAZTOPINO** za razkrivanje zobnih oblog.



Priporočamo

O primerni negi nasmeha s fiksnim ortodontskim aparatom povprašajte tudi strokovnjaka za ustno zdravje.

Zobna ščetka CURAPROX CS 5460

Za ščetkanje **roba med zobom in dlesnijo**.



CURAPROX CS 5460 ortho

S ščetko z utorom očistite predvsem **nosilce z zunanje strani**.



CURAPROX CS 1006 in 1009 single

Predele **okrog nosilcev** najlažje očistite s čopasto zobno ščetko.



CURAPROX CPS perio

Z večjimi medzobnimi ščetkami počistite **pod žičkami** fiksnega ortodontskega aparata.



CURAPROX CPS prime

Izberite ustrezne velikosti in poskrbite za **medzobne prostore**.



CURAPROX Implant & Braces DF 845

Okrog nosilcev in ob stiku nosilca z žičko z notranje strani boste najuspešnejši z odebeljeno zobno nitko.



CURAPROX Plaquefinder

Kako uspešni ste pri ščetkanju in čiščenju, preverite z raztopino ali tabletkami za dvobarvno razkrivanje zobnih oblog.



Kaj lahko ob redni higieni ŠE STORIMO za ustno zdravje?



Na www.dlesni.com se pridružite spletni delavnici Za zdrav nasmeh.



Sodelujte v projektu **Zdrave dlesni**. Več informacij je na voljo na www.dlesni.com.



Na www.youtube.com/ZdravNasmeh s pomočjo videovsebin preverite, ali je vaša uporaba pripomočkov za ustno higieno ustrezna.



Vsi izdelki so na voljo v spletni trgovini www.zdrav-nasmeh.com ter v lekarnah, drogerijah in specializiranih trgovinah.



**Zdrav nasmeh
je uspeh!**
www.zdrav-nasmeh.com

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

t. +386 (0)2 460 53 42
e. info@flegis.si